

カルプーレ® ラインアップ

CARPULE®

www.kulzer.co.jp

CARPULE®

Product Information




針先
ランセット加工
2段3面カット



ガンマー線滅菌

ゲージ(太さ)	サイズ		推奨用途	針基の色	包装	製品コード
	長さ					
35G (0.23mm)	12 (12mm)				100	66081765
					300エコノ	66081766
33G (0.26mm)	エキストラショート14 (14mm)				100	66974022
					320エコノ	66974023
	エキストラショート16 (16mm)				320エコノ	66975731
31G (0.28mm)	エキストラショート12 (12mm)				100	66974019
					320エコノ	66974021
					100	66974018
	ショート (16mm)				320エコノ	66974020
	ショート18 (18mm)				320エコノ	66975732
30G (0.30mm)	エキストラショート12 (12mm)				100	66974017
					100	66974016
	ショート (21mm)				100	66974013
					320エコノ	66974015
ロング (25mm)				100	66974014	
27G (0.40mm)	ショート (21mm)				100	66974011
					100	66974012

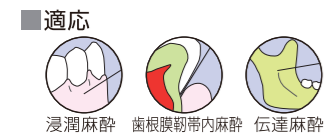

■ お問合せとご用命は...

警告 本品を穿刺中に抵抗を感じた場合、無理な力で操作をしないこと。
また、穿刺中に針の曲がり等異常を感じた場合は、使用を中止すること。[針の曲がり・折れの原因となる。]


禁忌 針を折り曲げて使用しないこと。
35G、33G、31Gは、伝達麻酔には使用しないこと。
35Gは、歯根膜鞏帯内麻酔には使用しないこと。

〈使用方法に関連する使用上の注意〉 35G、33Gは、大白歯には使用しないこと。

■ 販売元
クルツァー ジャパン 株式会社
本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13
TEL.03-5803-2151
大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174
福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12

www.kulzer.co.jp

D20CA05-05-2301-3000MM

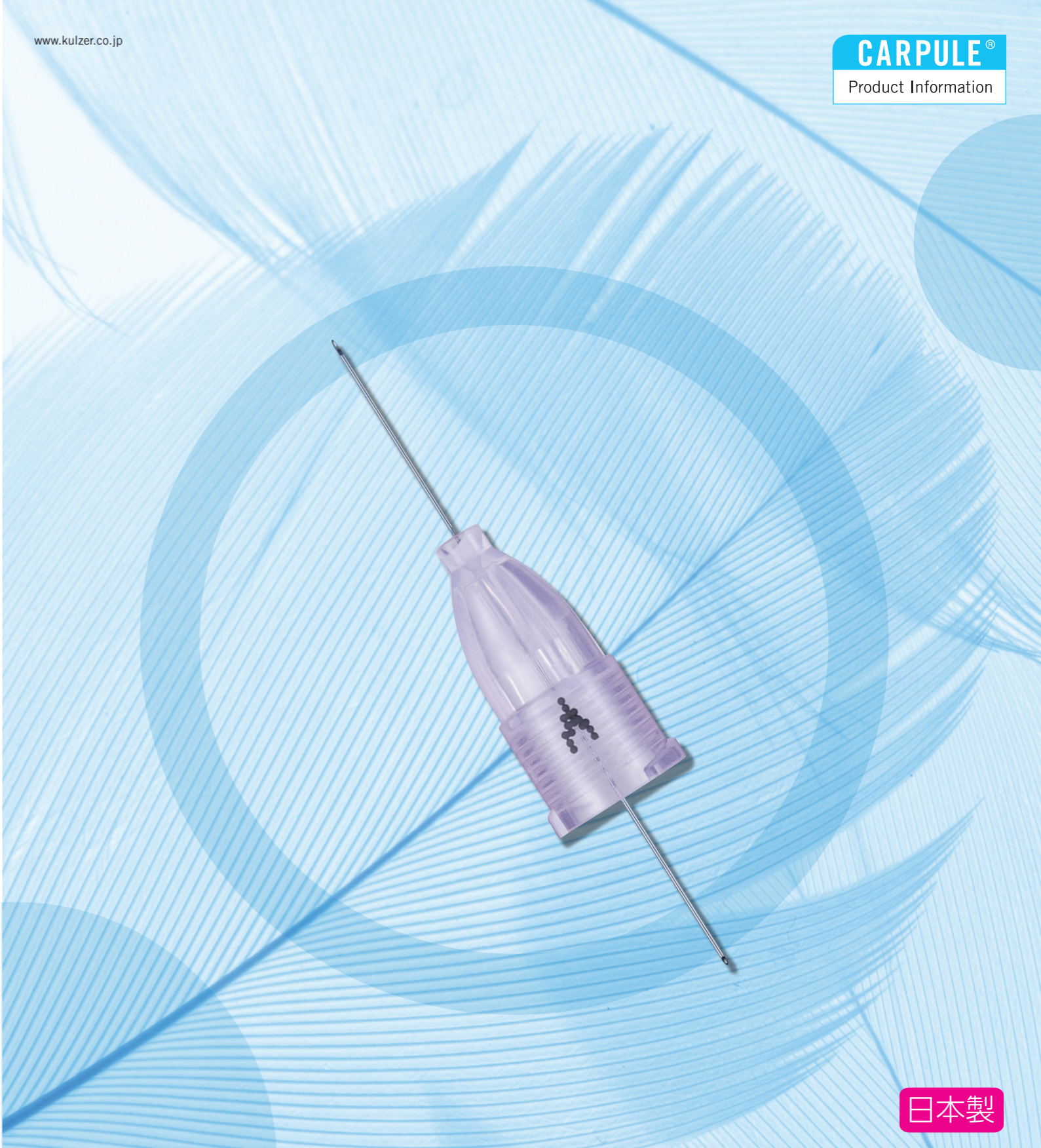

日本製

歯科用注射針
カルプーレ®
Giving a hand to oral health.

KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

カルプーレ®

日本国内製

当社のカルプーレシリーズは全てISO 13485を取得した国内工場で製造しています。



針基の色分け

針の各サイズごとに針基のカラーが異なるため、使用時の識別が容易です。

キャップホルダー

シース(鞘)後端にキャップを装着保管できるため、使用済針をリキャップして廃棄することができます。

剛性の高い針管

良質な素材と優れた加工技術により、剛性が高く破折によるトラブルを軽減します。

シリコンコーティング

刺入時の摩擦抵抗が低減されるため、刺入がスムーズで疼痛の少ない注射が可能です。

ポイントマーク(刃面)

針先カット面表示マークにより刺入方向が明確です。

ルアーロック/ネジ式対応

ロック式シリンジにも対応しており、1/2回転で装着できます。(標準的なネジ式にも対応します)



ランセット加工

3面に砥ぎ上げられた針先は刺入時の痛みと組織損傷を軽減します。

長期間の滅菌有効性

ガンマー線を照射しているため、有害残留物がなく均質に滅菌されています。ガンマー線滅菌の特徴を活かす気密包装により、使用期間の長期化(5年)を可能にしました。

エルゴノミックデザイン

針基は、なだらかな曲面で構成され、粘膜接触時の不快感が軽減されます。

バーজনシール

使用済み針の誤用を避けるため、紙シールを採用しています。

カルプーレシリーズ 最細針 35G

■ カルプーレシリーズ最細の35G注射針 (針寸法:0.23mm/直径、12mm/長さ)



■ 患者さんの負担を軽減



先端角9度の鋭角な刃面加工と、シリコンコーティングにより疼痛の少ない注射が可能です。